

6. 処方内容（控え）を印刷する

- ① デスクトップ上の「電子処方箋管理」をダブルクリックします。



- ② 電子処方箋管理画面が表示されますので、該当患者をクリックし、
[控え取得]をクリックしてください。


電子処方箋管理

患者ID: 日付(20240909) 名前: カナ(全角) 検索

区分	患者ID	氏名	診療日	同日	引換 番号	処方箋ID	登録日
取消	315	電処 七郎	2025年04月10日	1	紙	1f4de632-606f...	2025年04月03日
登録	172	資格 一郎	2025年04月03日	1	638383	982c79fb-a53a...	2025年04月03日
取消	315	電処 七郎	2025年04月03日	1	紙	dcb01d7c-6237...	2025年04月03日
登録	319	電処 四郎	2025年04月03日	1	910681	1df50ed5-01a5...	2025年04月03日
登録	315	電処 七郎	2025年04月01日	1	620812	ac40d9e1-ba59...	2025年04月03日


データ読み込み ☐ 全件取得 ID検索 控え取得 調剤結果取得 取消要求

- ③ 『準備中』のメッセージが表示されます。

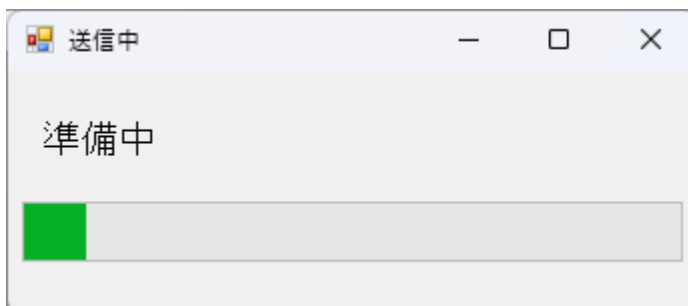

- ④ 処方箋控え画面が表示されますので、マークをクリックしてください。

処方内容（控え）が印刷されます。

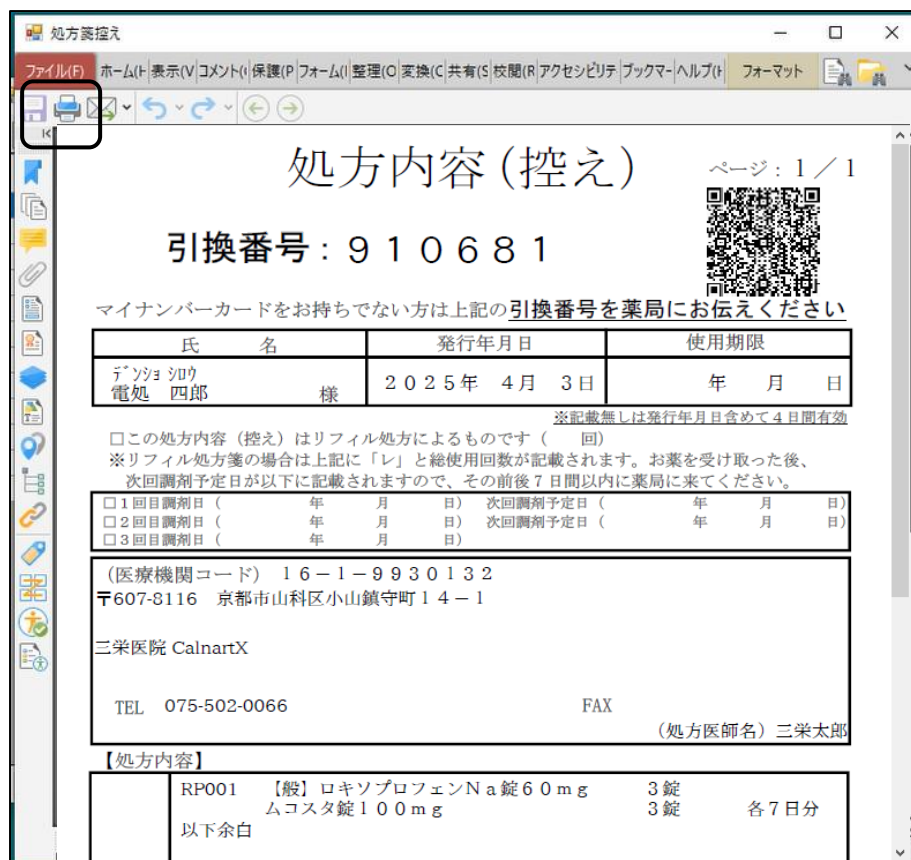

処方箋控え

ファイル(F) ホーム(H) 表示(V) コメント(I) 保護(P) フォーム(I) 整理(O) 変換(C) 共有(S) 校閲(R) アクセシビリティ プックマ ヘルプ(H) フォーマット

処方内容(控え) ページ: 1 / 1

引換番号: 910681

マイナンバーカードをお持ちでない方は上記の引換番号を薬局にお伝えください

氏 名	発行年月日	使用期限
デジッ シロウ 電処 四郎 様	2025年 4月 3日	年 月 日

※記載無しは発行年月日含めて4日間有効

☐ この処方内容(控え)はリフィル処方によるものです (回)

※リフィル処方箋の場合は上記に「レ」と総使用回数が記載されます。お薬を受け取った後、次回調剤予定日が以下に記載されますので、その前後7日間以内に薬局に来てください。

☐ 1回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)
☐ 2回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)
☐ 3回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)

(医療機関コード) 16-1-9930132
〒607-8116 京都市山科区小山镇守町14-1
三栄医院 CalnartX
TEL 075-502-0066 FAX (処方医師名) 三栄太郎

【処方内容】

RP001	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	3錠	各7日分
	ムコスタ錠100mg	3錠	
以下余白			



マークがない場合は、処方箋内容(控え)画面で右クリックし、

「印刷」をクリックしてください。



処方箋控え

処方内容(控え) ページ: 1 / 1

引換番号: 910681

マイナンバーカードをお持ちでない方は上記の引換番号を薬局にお伝えください

氏 名	発行年月日	使用期限
デジッ シロウ 電処 四郎 様	2025年 4月 3日	年 月 日

※記載無しは発行年月日含めて4日間有効

☐ この処方内容(控え)はリフィル処方によるものです (回)

※リフィル処方箋の場合は上記に「レ」と総使用回数が記載されます。お薬を受け取った後、次回調剤予定日が以下に記載されますので、その前後7日間以内に薬局に来てください。

☐ 1回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)
☐ 2回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)
☐ 3回目調剤日 (年 月 日)	次回調剤予定日 (年 月 日)

(医療機関コード) 16-1-9930132
〒607-8116 京都市山科区小山镇守町14-1
三栄医院 CalnartX
TEL 075-502-0066 FAX (処方医師名) 三栄太郎

【処方内容】

RP001	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	3錠	各7日分
	ムコスタ錠100mg	3錠	
以下余白			

右クリックメニュー:

- ✓ 選択ツール(E)
- 手のひらツール(N)
- マーカーズーム(Z)
- 右回転(R)
- 印刷(P)... Ctrl+P
- 簡易検索(F)
- 文書のプロパティ(D)...
- ナビゲーションパネルボタンを表示(H)

⑤ 印刷画面が表示されますので、[印刷]をクリックしてください。

処方内容（控え）が印刷されます。

